


TAMPONE RAPIDO RICERCA Ag SARS-CoV-2 VivaDiag (sistema ottico)




RACCOLTA CAMPIONI

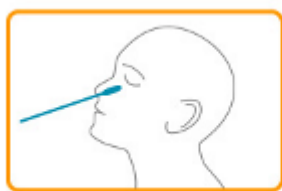

Tampone nasale




Tampone orofaringeo

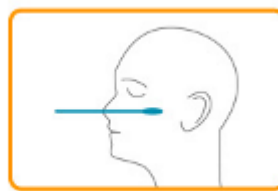


Tampone rinofaringeo

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE

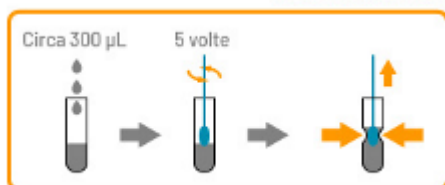

1 - Preparare il campione

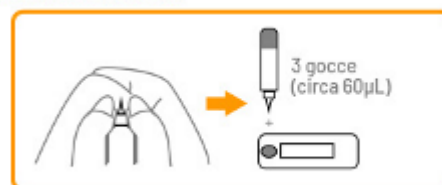

2 - Applicare il campione estratto

.DISPENSARE 15 GOCCE DI SOLUZIONE DI ESTRAZIONE

.ROTEARE 5 VOLTE

LETTURA DEL RISULTATO

RECUPERANDO



CONSIDERARE POSITIVO IL TEST PER OGNI INTENSITA' DI COLORE IN BANDA T